

# MSM10 / AFP (kUI/L)

Sérum, reprendre par 1 ml H2O

Limites acceptables à ± 12 % (Valtec/PBQ)

Péréemption : 31/12/2012

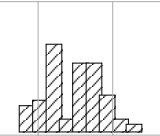


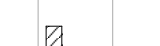


Groupes techniques/appareils	Codage	Histogramme	n	Cible	CV	Lim. accept.
ENSEMBLE DES RESULTATS	K		60 62	<b>75,61</b> 74,65	7,8 15,3	66,5 - 84,7
BRAHMS KRYPTOR	SN		13 15	<b>83,58</b> 78,32	1,9 27,7	73,5 - 93,6
PERKIN ELMER	KC		16 16	<b>72,66</b> 72,66	3,2 3,2	63,9 - 81,4
- dont XPRESS	KC XPR		11 11	<b>71,91</b> 71,91	3,2 3,2	63,2 - 80,6
ROCHE MODULAR/ELECSYS	RD		10 11	<b>77,90</b> 79,17	3,8 6,4	68,5 - 87,3
SIEMENS IMMULITE	SA		19 20	<b>70,58</b> 71,02	4,4 5,1	62,1 - 79,1
- IMMULITE 2000	SA U4R		18 19	<b>70,29</b> 70,76	4,2 5,0	61,8 - 78,8

# MSM10 / BETA LIBRE (U/L)

Sérum, reprendre par 1 ml H2O

Limites acceptables à ± 22 % (Ricos)

Péréemption : 31/12/2012

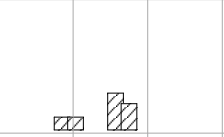
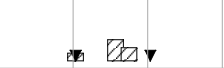
Groupes techniques/appareils	Codage	Histogramme	n	Cible	CV	Lim. accept.
ENSEMBLE DES RESULTATS	1		55 57	<b>30,903</b> 30,521	11,3 17,7	
BRAHMS KRYPTOR	SN		14 15	<b>33,204</b> 33,391	3,0 3,6	25,89 - 40,51
PERKIN ELMER	KC		18 19	<b>28,189</b> 28,079	2,8 3,2	21,98 - 34,39
- dont XPRESS	KC XPR		14 15	<b>28,314</b> 28,167	2,8 3,4	22,08 - 34,55
ROCHE MODULAR/ELECSYS	RD		6 7	<b>25,697</b> 22,120	2,7 42,9	20,04 - 31,35
SIEMENS IMMULITE	SA		15 16	<b>34,073</b> 34,406	6,2 7,1	26,57 - 41,57

# MSM10 / ESTRIOLE (nmol/L)

Sérum, reprendre par 1 ml H<sub>2</sub>O

Limites acceptables à ± 22 % (Ricos)

Péréemption : 31/12/2012

Groupes techniques/appareils	Codage	Histogramme	n	Cible	CV	Lim. accept.
ENSEMBLE DES RESULTATS	J		7 7	<b>4,003</b> 4,003	17,0 17,0	
PERKIN ELMER	KC		6 6	<b>4,198</b> 4,198	11,5 11,5	3,27 - 5,13

# MSM10 / hCG (U/L)

Sérum, reprendre par 1 ml H2O

Limites acceptables à ± 10 % (Valtec/PBQ)

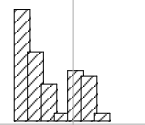




Péréemption : 31/12/2012

Groupes techniques/appareils	Codage	Histogramme	n	Cible	CV	Lim. accept.
ENSEMBLE DES RESULTATS	1		33 35	<b>555,1</b> 548,1	22,1 29,1	
BRAHMS KRYPTOR	SN		4 4	<b>620,6</b> 620,6	2,5 2,5	558 - 683
SIEMENS IMMULITE	SA		19 20	<b>630,1</b> 641,3	9,8 12,2	567 - 694
- IMMULITE 2000	SA U4R		18 19	<b>629,7</b> 641,6	10,1 12,5	566 - 693
ROCHE MODULAR/ELECSYS	RD		10 11	<b>386,5</b> 352,4	6,2 32,7	347 - 426

# MSM10 / PAPP-A (mUI/L)

Sérum, reprendre par 1 ml H<sub>2</sub>O  
Pérémission : 31/12/2012

Limites acceptables à ± 22 % (Ricos)

Groupes techniques/appareils	Codage	Histogramme	n	Cible	CV	Lim. accept.
ENSEMBLE DES RESULTATS	M		52 52	<b>3375,8</b> 3375,8	26,8 26,8	
BRAHMS KRYPTOR	SN		12 12	<b>2604,7</b> 2604,7	4,2 4,2	2031 - 3178
PERKIN ELMER	KC		15 17	<b>2735,8</b> 2695,0	4,1 5,8	2133 - 3338
ROCHE MODULAR/ELECSYS	RD		7 7	<b>3507,3</b> 3507,3	3,4 3,4	2735 - 4279
SIEMENS IMMULITE	SA		16 16	<b>4620,0</b> 4620,0	5,9 5,9	3603 - 5637