

GUIDE D'UTILISATION DU SERVEUR PROBIOQUAL

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| 1. CONNEXION AU SERVEUR | 2 |
| 1.1. Accès au serveur internet..... | 2 |
| 1.2. Connexion à votre compte | 2 |
| 1.3. Mot de passe perdu..... | 2 |
| 2. MENU « SAISIE »..... | 3 |
| 2.1. Saisie EEQ | 4 |
| 2.2. Saisie CIQ..... | 7 |
| 3. MENU « CONSULTATION »..... | 9 |
| 3.1. Résultats globaux..... | 9 |
| 3.2. Vos résultats | 9 |
| 3.3. EEQ : Extraction de résultats / Incertitudes de mesures..... | 9 |
| 3.3.1. Extraction des résultats | 10 |
| 3.3.2. Extraction au format SH FORM 38..... | 10 |
| 3.3.3. Incertitudes de mesure..... | 10 |
| 3.4. CIQ : consultation des groupes de pairs | 11 |
| 4. MENU « DOCUMENTATION »..... | 12 |
| 5. MENU « COMPTE »..... | 12 |
| 5.1. Gestion des codes mémorisés..... | 12 |
| 5.2. Archives | 12 |
| 5.3. Gestion des adresses mails..... | 13 |
| 5.4. Gestion des utilisateurs | 13 |
| 6. MENU « UTILITAIRES » | 14 |
| 6.1. Table de codage..... | 14 |
| 6.2. Convertisseur d'unité | 15 |
| 6.3. Retour sur le site ProBioQual | 15 |
| 7. MENU « AGENDA »..... | 15 |
| 8. MENU « INSCRIPTIONS »..... | 15 |
| 9. MENU « AIDE »..... | 15 |
| 10. DÉCONNEXION..... | 15 |
| 11. COMPATIBILITÉ..... | 15 |

1. CONNEXION AU SERVEUR

1.1. Accès au serveur internet

Vous pouvez accéder au serveur par deux moyens différents :

- Par notre site internet (<https://www.probioqual.com>) sur la page d'accueil en cliquant sur :



- En tapant directement l'adresse du serveur dans votre navigateur : <https://dynamic.probioqual.com/>

1.2. Connexion à votre compte

Vous arrivez à l'écran de connexion suivant :

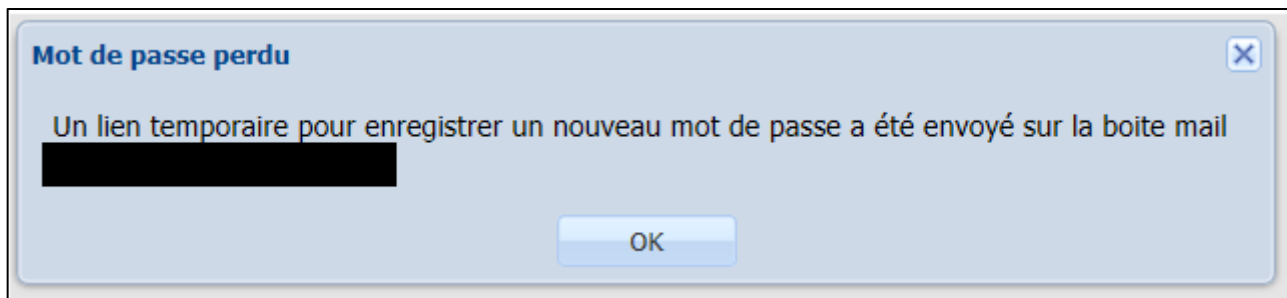
| | |
|--|--|
| | <p>N° de laboratoire : saisissez votre code labo / N° d'anonymat / N° d'identification (Nombre contenant 1 à 4 chiffres).</p> <p>Login (<i>Champ facultatif</i>) : saisissez votre login si votre laboratoire a paramétré l'accès à différents utilisateurs sinon laissez la case vide. Pour gérer les différents utilisateurs rendez-vous au paragraphe §5.5</p> <p>Mot de passe : saisissez votre mot de passe.</p> |
|--|--|

1.3. Mot de passe perdu

Vous avez perdu/oublié votre mot de passe, cliquez sur « mot de passe perdu ». Une fenêtre apparaît :

| | |
|--|--|
| | <p>Clé de récupération : vous trouverez cette clé dans les mails des rapports d'EEQ que nous vous envoyons, juste en dessous de votre adresse. C'est une clé alphanumérique composée de 32 caractères => faites un copier/coller de la clé afin d'éviter toute erreur de frappe.</p> <p>Login : saisissez votre login si votre laboratoire a paramétré l'accès à différents utilisateurs sinon laissez la case vide.</p> <p>Adresse email : saisissez votre adresse mail (l'adresse mail saisie doit être connue de ProBioQual).</p> |
|--|--|

Une fois toutes ces informations renseignées, cliquez sur « envoyer ». Une nouvelle fenêtre apparaît :



ATTENTION ! le lien temporaire n'est valable que 15 minutes

Cliquez sur le lien dans l'e-mail que vous avez reçu. Vous êtes, ensuite, redirigé vers une page internet où vous pourrez créer un nouveau mot de passe :

| | |
|--|---|
| | <p>N° de laboratoire : saisissez votre code labo / N° d'anonymat / N° d'identification (Nombre contenant 1 à 4 chiffres)</p> <p>Login : saisissez votre login si votre laboratoire a paramétré l'accès à différents utilisateurs sinon laissez la case vide.</p> <p>Mot de passe : saisissez un nouveau mot de passe en respectant les conditions suivantes : au moins 8 caractères dont 3 des 4 types suivants = chiffres, lettres minuscules, lettres majuscules et caractères spéciaux.</p> <p>Saisissez une deuxième fois le mot de passe choisi et cliquez sur « enregistrer ».</p> |
|--|---|

2. MENU « SAISIE »

| | |
|--|--|
| | <p>Ce menu comporte 2 items :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saisie EEQ - Saisie CIQ |
|--|--|

2.1. Saisie EEQ

| <div data-bbox="165 226 858 488"> <p>EEQ</p> <p>Libellé</p> <p>EEQ - Biochimie Sérique (CQH) 2018</p> <p>EEQ - Biochimie Urinaire (CMU) 2018</p> <p>EEQ - Catécholamines Urinaires (CATU) 2018</p> <p>EEQ - Cortisol libre urinaire (CLU) 2018</p> </div> <div data-bbox="165 499 858 734"> <p>Contrôles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contrôle</th> <th>Date limite de saisie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18BA98/18BA99</td> <td>19/11/2018 - 24:00</td> </tr> <tr> <td>18BA47</td> <td>26/11/2018 - 24:00</td> </tr> <tr> <td>18BA48</td> <td>03/12/2018 - 24:00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="165 745 858 913"> <p>Numéro d'anonymat</p> <p>Code labo</p> <p>2</p> <p>2A</p> </div> | Contrôle | Date limite de saisie | 18BA98/18BA99 | 19/11/2018 - 24:00 | 18BA47 | 26/11/2018 - 24:00 | 18BA48 | 03/12/2018 - 24:00 | <p> Cliquez d'abord sur la ligne de l'EEQ voulue (seules les EEQ pour lesquelles vous êtes inscrits et qui sont à saisir s'affichent).</p> <p> Une fois l'EEQ choisie, cliquez sur le/les contrôle(s) que vous voulez saisir.</p> <p> Cliquez ensuite sur le numéro d'anonymat que vous voulez utiliser pour saisir le contrôle.</p> <p>Rappel : 1 coffret commandé vous donne accès à 2 saisies (exemple : 2 et 2A) [Hors programme GDS et COOX].</p> <p>Chaque coffret supplémentaire vous ouvre 2 saisies supplémentaires (ex : 2B, 2C, etc...).</p> |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| Contrôle | Date limite de saisie | | | | | | | | |
| 18BA98/18BA99 | 19/11/2018 - 24:00 | | | | | | | | |
| 18BA47 | 26/11/2018 - 24:00 | | | | | | | | |
| 18BA48 | 03/12/2018 - 24:00 | | | | | | | | |

| <div data-bbox="165 1001 858 1568"> <p>Saisie</p> <p>EEQ</p> <p>Libellé</p> <p>EEQ - Biochimie Sérique (CQH) 2018</p> <p>EEQ - Biochimie Urinaire (CMU) 2018</p> <p>EEQ - Electrophorèse et immunotypage des Protéines (EPS) 2018</p> <p>EEQ - Vitesse de Sédimentation (VS) 2018</p> <p>Contrôles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contrôle</th> <th>Date limite de saisie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18BA48</td> <td>03/12/2018 - 24:00</td> </tr> <tr> <td>18BA49</td> <td>10/12/2018 - 24:00</td> </tr> </tbody> </table> </div> | Contrôle | Date limite de saisie | 18BA48 | 03/12/2018 - 24:00 | 18BA49 | 10/12/2018 - 24:00 | <p>Si la taille de votre écran ne permet pas d'afficher ces 3 zones, vous pouvez faire varier la taille d'une zone au profit d'une autre : positionnez la souris entre deux zones, le curseur change de forme, gardez le bouton de gauche enfoncé et faites glisser soit vers le haut soit vers le bas pour modifier la taille des zones.</p> |
|--|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|
| Contrôle | Date limite de saisie | | | | | | |
| 18BA48 | 03/12/2018 - 24:00 | | | | | | |
| 18BA49 | 10/12/2018 - 24:00 | | | | | | |

Une fois les 3 étapes effectuées, l'écran de saisie s'affiche à droite de la fenêtre :

| Analyte | Unité | Technique | Appareil | Tri | 18BA47 | Instructions par analyte |
|--------------|----------|-----------|----------|-----|--------|--------------------------|
| Amylase | U/L 37°C | C9 | DQL | XX | | |
| ALAT (TGP) | U/L 37°C | GR | TOA | XX | | |
| ASAT (TGO) | U/L 37°C | S7 | UOF | XX | | |
| Bicarbonates | mmol/L | XX | XXX | XX | | |

Instructions générales
Pas d'instructions particulières pour ce contrôle.

Votre commentaire

Cet écran comprend quatre zones :

- La zone de saisie.
- Une case contenant éventuellement un commentaire spécifique à la ligne de chaque analyte, ou nous pouvons inscrire des renseignements utiles à la saisie (facteur de conversion pour les unités, modification de codage pour un paramètre, etc...).
- Une case contenant éventuellement des instructions pour le contrôle.
- Une zone de texte où vous pouvez saisir un commentaire libre (codage non trouvé, problème technique, etc...).

En ce qui concerne la saisie, seules les cases des codes techniques, appareils et tri, ainsi que la case du résultat (ou éventuellement le résultat du contrôle 1 et 2 dans le cas d'un contrôle double) sont à saisir. Par défaut les codages sont pré-saisi avec les codes utilisés la fois précédente, donc dans la plupart des cas vous n'avez que le résultat à saisir. La colonne du résultat porte le nom du contrôle (dans l'exemple 18BA47). Pour saisir il faut cliquer dans la première case à saisir, puis passer à la suivante par une des deux méthodes à votre convenance :

- Soit en cliquant directement dans la case suivante
- Soit en utilisant la touche tabulation

Une fois que vous avez saisi ou modifié une case, vous pouvez le voir grâce au petit triangle rouge en haut à gauche de la case.

N.B. : Pour plusieurs EEQ (Électrophorèse et immunotypage des Protéines, Bactériologie et Formule leucocytaire sur lames numérisés...) certains résultats doivent être rendus sous forme de phrases préétablies que vous sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant.

Exemple pour l'électrophorèse et immunotypage des Protéines :

| | |
|--|---|
| Analyse tracé : | Pas de réponse |
| Analyse tracé : | Pas de réponse |
| Analyse tracé : | Pas de commentaire particulier |
| Analyse tracé : | Hypoalbuminémie |
| Analyse tracé : | Bisalbuminémie |
| Interprétation : | Augmentation de la fraction alpha1-globulines |
| RECHERCHE D'IMMUNOGLOBULINE | Augmentation de la fraction alpha2-globulines |
| Technique : | Augmentation de la fraction bêta-globulines |
| Recherche immunoglobuline monoclonale : | Augmentation de la fraction bêta1-globulines |
| | Augmentation de la fraction bêta2-globulines |
| | Augmentation de la fraction gamma-globulines |
| Instructions générales | Diminution de la fraction alpha1-globulines |
| Pas d'instructions particulières pour ce d | Diminution de la fraction alpha2-globulines |
| | Diminution de la fraction bêta-globulines |
| | Diminution de la fraction bêta1-globulines |
| Votre commentaire | Diminution de la fraction bêta2-globulines |

Saisie ou modification des codages et résultats

| Analyte | Unité | Technique |
|---------|-------|-----------|
| Apo A1 | g/L | |
| Apo B | g/L | |

Quand la saisie est terminée, cliquez sur le bouton **Enregistrer** (ou Annuler si vous ne voulez pas sauvegarder les modifications) : au bout de quelques instants, les triangles rouges disparaissent, et un accusé de saisie par mail vous est envoyé. Si les triangles rouges ne disparaissent pas, c'est probablement que vos résultats ne sont pas enregistrés : recliquez sur le bouton « interface de saisie » et revenez en saisie du contrôle. Si les résultats n'y sont pas c'est que vous devez les ressaisir.

Si vous ne recevez pas l'accusé de saisie, c'est souvent un problème de mail, et non de saisie. Là encore, retournez en saisie pour voir si vos résultats y sont bien. Au besoin allez en Archives pour vous renvoyer l'accusé de saisie, ou encore utilisez le bouton « Afficher le résumé » (voir ci-dessous).

Bouton « **Afficher le résumé** » : une fois la saisie validée (par le bouton Enregistrer), vous pouvez afficher dans une nouvelle fenêtre le résumé de votre saisie. Ceci est intéressant si vous ne pouvez pas consulter l'accusé de saisie, ou si vous voulez imprimer une preuve de saisie (utilisez l'option Imprimer dans le menu Fichier de votre navigateur).

2.2. Saisie CIQ

| Saisie | | | | | |
|---|---------|--------------|---------|--------------|--|
| <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>CIQ</p> <p>Libellé</p> <p>CIQ - Biochimie Sérique (CQPS) 2019</p> <p>CIQ - Biochimie Urinaire (CQPU) 2019</p> <p>CIQ - Immunodosages avec Marqueur (CIPE) 2019</p> <p>CIQ - Marqueurs du Risque de Trisomie (MSMPE) 2019</p> <p>CIQ - Biochimie Sérique (CQPS) 2018</p> <p>CIQ - Biochimie Urinaire (CQPU) 2018</p> </div> | | | | | |
| <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> <p>Contrôle</p> <p>Lot</p> <p>AC13</p> <p>AC14</p> <p>AC15</p> <p>C61</p> </div> | | | | | |
| <div style="border: 2px solid green; padding: 5px;"> <p>Identification de l'automate</p> <p>Nom</p> <p>Test</p> <p>Nouveau Renommer Archiver</p> </div> | | | | | |
| <div style="border: 2px solid purple; padding: 5px;"> <p>Période</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mois / Année</th> <th>Rapport</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Octobre 2018</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ajouter</p> </div> | | Mois / Année | Rapport | Octobre 2018 | |
| Mois / Année | Rapport | | | | |
| Octobre 2018 | | | | | |

Sélectionnez le programme CIQ pour lequel vous souhaitez saisir vos résultats.
Exemple : CIQ – Biochimie sérique (CQPS) 2018

Une fois le CIQ sélectionné, choisissez le lot du CIQ.
Exemple : AC13

Sélectionnez l'appareil concerné par les résultats des CIQ.
 Au niveau de l'appareil, vous pouvez archiver un appareil qui n'est plus utilisé (il ne sera plus visible mais ne sera pas supprimé, donc les résultats seront toujours disponibles pour les récapitulatifs), modifier son nom ou en créer un nouveau.
Exemple : Test

Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez saisir vos résultats de CIQ. Si la période que vous souhaitez n'apparaît pas cliquez sur « Ajouter » pour créer un mois

Une fois les 4 étapes effectuées, l'écran de saisie s'affiche à droite de la fenêtre :

Cet écran comprend quatre zones :

- La zone de saisie.
- Une case contenant éventuellement un commentaire spécifique à la ligne de chaque analyte, ou nous pouvons inscrire des renseignements utiles à la saisie.
- Une case contenant éventuellement des instructions pour le contrôle.
- Une zone de texte où vous pouvez saisir un commentaire libre.

Pour chaque analyte saisissez :

- Le nombre de résultats du mois (colonne N)
- La moyenne
- Le CV
- Modifiez éventuellement les codes technique, appareil et tri

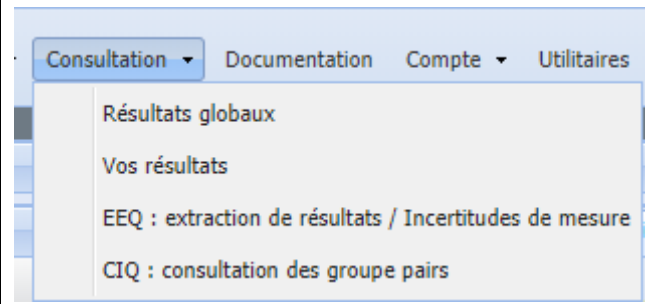
| | |
|--|---|
| | <p> Vous pouvez aussi changer l'unité : cliquez sur l'unité de l'analyse à modifier, un menu déroulant de choix apparaît et liste toutes les unités valides pour l'ensemble des analyses du contrôle. Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de ne lister que les unités possibles pour l'analyse sélectionnée, mais si vous choisissez une unité non prévue, vous ne pourrez pas valider la saisie, et un message d'erreur vous indiquera les unités valides.</p> <p> Pour valider votre saisie, cliquez sur le bouton « Enregistrer » : un message vous indique que les données ont été sauveées et vous propose d'ouvrir l'accusé de réception. Si vous répondez Oui, une nouvelle page s'ouvre avec le résumé de la saisie, et une première interprétation par rapport aux cibles diffusées en début d'année.</p> <p> Après la saisie, cette page peut être réaffichée en cliquant sur le bouton « Afficher le résumé ».</p> |
|--|---|

À l'issue de votre saisie, vous pouvez visualiser un résumé de saisie comportant une 1ère interprétation par rapport aux valeurs cibles diffusées en début d'année.

À partir du 15 du mois, ProBioQual vous envoie par e-mail un rapport avec une interprétation de vos résultats par rapport à des cibles recalculées d'après les résultats reçus depuis le début d'année. Ce rapport peut également être consulté sur le site (icône en forme d'œil dans la liste des périodes).

Vous pouvez remettre ces résultats en validation si vous avez fait une erreur de saisie, et que vous vous en rendez compte en recevant le rapport. Il suffit de cliquer sur la période concernée et de modifier ce qui doit l'être, au moment du clic sur enregistrer vous aurez une demande de confirmation de la remise en validation des résultats. Les résultats seront de nouveaux validés par ProBioQual sous quelques jours et vous recevrez un nouveau rapport par mail.

3. MENU « CONSULTATION »

| | |
|---|---|
|  | <p>Ce menu comporte 4 items :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Résultats globaux - Vos résultats - EEQ : extraction de résultats / Incertitudes de mesure - CIQ : consultation des groupes de pairs |
|---|---|

3.1. Résultats globaux

Il s'agit de consulter l'ensemble des résultats pour un contrôle sous forme d'un fichier PDF. Cela peut être utile si vous voulez consulter les résultats d'un analyte que vous n'avez pas rendu, car selon votre paramétrage il est possible que vous ne receviez que les graphiques des analytes que vous avez rendus.

Ici encore vous devez procéder par étapes :

- Choisissez d'abord l'EEQ désirée (*Exemple : EEQ – Biochimie Sérique (CQH) 2018*)
- Puis le contrôle voulu pour l'EEQ choisi

Cliquez alors sur le lien qui apparaît dans la zone de droite pour afficher le PDF.

3.2. Vos résultats

Le principe de fonctionnement est le même que pour les résultats globaux, mais cette fois-ci ce sont vos résultats avec les appréciations qui sont affichés (avec les cibles, notes, z-scores et biais).

Si vous avez rendu des résultats avec plusieurs numéros d'anonymat, ils apparaissent à la suite.

3.3. EEQ : Extraction de résultats / Incertitudes de mesures

Cette fonctionnalité vous permet de télécharger ou d'envoyer par mail un fichier compatible Excel contenant vos résultats d'EEQ selon 3 types de rapports différents :

- **Extraction des résultats**
- **Extraction au format SH FORM 38**
- **Incertitude de mesure (8 résultats minimum du même groupe de pairs et z-score <3)**

EEQ

ProBioQual - extraction de résultats d'EEQ

Résultats disponibles: 2012 à 2021

Période désirée : 01/01/2021

du:

au: 08/04/2021

EEQ: Tous les EEQ

Type de rapport: Extraction des résultats

Adresse mail: Extraction des résultats

Extraction

Incertitudes de mesure (8 résultats minimum du même groupe de pairs et z-score <3)

3.3.1. Extraction des résultats

- 1- Sélectionnez la période pour laquelle vous voulez extraire vos résultats en tapant les dates (respectez bien le format JJ/MM/AAAA) ou plus simplement en cliquant sur les icones représentant un calendrier à droite des dates.
- 2- Sélectionnez ensuite le programme pour lequel vous voulez extraire vos résultats. Vous avez plusieurs possibilités :
 - Extraction de **tous les résultats** inclus dans la période que vous avez choisie en sélectionnant « Tous les EEQ »
 - Extraction de **tous les résultats d'un même programme** inclus dans la période que vous avez choisie en sélectionnant le programme souhaité (*exemple : Biochimie Sérique (CQH)*).
 - Extraction de **tous les résultats d'un même programme sur une année complète** en sélectionnant le programme suivi de l'année (*Exemple : Biochimie Sérique (CQH) 2018*). Dans ce cas, il est inutile de renseigner la période.
- 3- Dans « Type de rapport » choisissez « Extraction des résultats ».
- 4- Vous avez 2 possibilités pour récupérer les données extraites :
 - Si vous souhaitez envoyer le fichier extrait par mail, saisissez la/les adresse(s) email(s) des personnes qui souhaitent recevoir le fichier et cliquez sur le bouton « Envoi par mail » (s'il y a plusieurs adresses mails, séparez-les par un point-virgule sans mettre d'espace entre les adresses).
 - Sinon, cliquez sur le bouton « Extraction ». **Attention** : l'extraction n'est pas immédiate, vous saurez qu'elle est terminée lorsque le lien suivant apparaît dans la page : « Pour télécharger le fichier cliquer sur le lien avec le bouton droit et choisissez Enregistrer sous ». Cliquez sur le lien pour télécharger le fichier.

3.3.2. Extraction au format SH FORM 38

Effectuez les mêmes opérations que pour l'extraction des résultats (Cf. ci-dessus). Vous obtiendrez un tableau d'extraction au format SH FORM 38.

3.3.3. Incertitudes de mesure

IMPORTANT ! Pour le calcul d'incertitude il faut au minimum **8 résultats qui ont été notés** (les valeurs « inférieures à » ou supérieures à » ne sont pas prises en compte), dont le **z-score est inférieur à 3 et dont le codage est identique**.

- 1- Sélectionnez la période pour laquelle vous voulez calculer vos incertitudes de mesure. **ATTENTION, choisissez une période assez large pour avoir 8 valeurs avec des z-scores inférieurs à 3.**
- 2- Sélectionnez ensuite le programme pour lequel vous voulez calculer vos incertitudes de mesure. Vous avez plusieurs possibilités :
 - Extraction de **tous les résultats** inclus dans la période que vous avez choisie en sélectionnant « Tous les EEQ »
 - Extraction de **tous les résultats d'un même programme** inclus dans la période que vous avez choisie en sélectionnant le programme souhaité (*exemple : Biochimie Sérique (CQH)*).
 - Extraction de **tous les résultats d'un même programme sur une année complète** en sélectionnant le programme suivi de l'année (*Exemple : Biochimie Sérique (CQH) 2018*). Dans ce cas, il est inutile de renseigner la période.
- 3- Dans « Type de rapport » choisissez « Incertitudes de mesure ». Vous recevrez l'incertitude de mesure élargie, ainsi que son intervalle de confiance. Ceci permet de comparer l'IM de deux automates : si les intervalles de confiance sont disjoints, alors les IM des deux appareils sont significativement différentes.
- 4- Vous avez 2 possibilités pour récupérer les données extraites :
 - Si vous souhaitez envoyer le fichier extrait par mail, saisissez la/les adresse(s) email(s) des personnes qui souhaitent recevoir le fichier et cliquez sur le bouton « Envoi par mail » (s'il y a plusieurs adresses mails, séparez-les par un point-virgule sans mettre d'espace entre les adresses).
 - Sinon, cliquez sur le bouton « Extraction ». **Attention** : l'extraction n'est pas immédiate, vous saurez qu'elle est terminée lorsque le lien suivant apparaît dans la page : « Pour télécharger le fichier cliquer sur le lien avec le bouton droit et choisissez Enregistrer sous ». Cliquez sur le lien pour télécharger le fichier.

IMPORTANT : Si le fichier que vous ouvrez ne contient aucune donnée, cela signifie que vous n'avez pas assez de valeurs sur la période sélectionnée pour réaliser le calcul de l'incertitude de mesure. Il faut que vous allongiez la période et que vous recommenciez l'extraction.

3.4. CIQ : consultation des groupes de pairs

Cette option ne vous concerne que si vous envoyez des calculs mensuels sur vos résultats de contrôles internes (contrôle interne externalisé). Vous avez alors la possibilité de consulter l'évaluation de vos résultats mensuels, et en plus de regarder si la moyenne de votre groupe de pair a évolué depuis l'établissement des cibles par ProBioQual.


Pour cela cliquez d'abord dans la partie « historique » sur le contrôle et le mois voulu : dans la liste en dessous apparaît la liste des analytes que vous avez rendus pour le mois choisi.

Dans la zone de droite vous trouverez alors le détail de l'appréciation des résultats du mois choisi (codage, moyenne mensuelle et CV, références utilisées pour l'interprétation (cible, limites acceptables) et interprétation. Ce sont ni plus ni moins les résultats que vous recevez par mail, par contre vous pouvez en plus demander à visualiser la moyenne et le CV de votre groupe de pairs, basé sur les résultats mensuels envoyés par vos confrères.

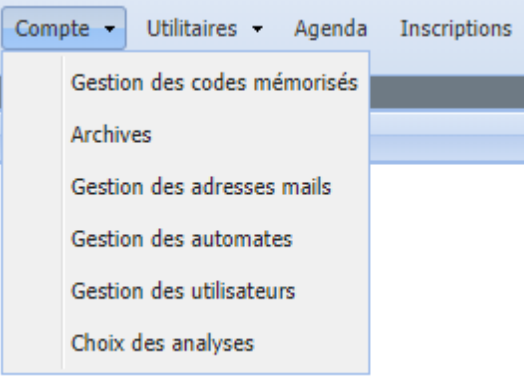
Pour cela, dans la partie « recherche du groupe de pairs », cliquez sur menu déroulant et choisissez votre groupe de pair, éventuellement restreignez la recherche à une période définie, puis cliquez sur le bouton « voir les données » : au bout de quelques secondes le résultat apparaît dans la zone en dessous, à la rubrique « données actuelles du groupe de pairs ». Sont calculés cible, CV et limites acceptables ; si le nombre de résultats est trop faible pour avoir une signification statistique cela est signalé.

4. MENU « DOCUMENTATION »

Dans ce menu vous pouvez consulter les documents associés aux EEQ et CIQ (Notes techniques, bordereaux de saisie, notices d'utilisation, Cas cliniques, etc....).

Cliquez sur le programme qui vous intéresse, puis sur le document que vous voulez. Pour consulter le document il vous suffit de cliquer sur l'œil : 

5. MENU « COMPTE »

| | |
|---|--|
|  | <p>Ce menu comporte 6 items :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestion des codes mémorisés - Archives - Gestion des adresses mails - Gestion des automates (Page en cours de construction) - Gestion des utilisateurs |
|---|--|

5.1. Gestion des codes mémorisés

Chaque fois que vous saisissez ou modifiez un codage (technique, appareil ou tri), ce choix est mémorisé pour les prochaines saisies. La fonction « gestion des codes mémorisés » vous permet de visualiser ou modifier vos codes mémorisés, individuellement pour chaque numéro d'anonymat. Ceci étant, cette fonction est facultative puisque cette mémorisation se fait automatiquement lors de la saisie.

Choisissez d'abord un groupe d'analytes (par exemple Biochimie) en cliquant sur son nom dans la zone en haut à gauche. Ceci provoque l'affichage dans la zone en dessous des différents numéros d'anonymat pour lesquels il existe des codes mémorisés. Cliquez sur un numéro d'anonymat pour afficher dans la zone en dessous les différents analytes pour lesquels il y a des codes mémorisés pour ce numéro d'anonymat.

Cliquez enfin sur l'analyte désiré, le détail du codage s'affiche dans la zone de droite : utilisez les menus déroulants pour changer technique et appareil, et éventuellement saisissez manuellement le code tri, puis cliquez sur Enregistrer.

Si vous voulez saisir les codes d'une analyse que vous n'avez encore jamais saisie, elle n'apparaît pas dans la liste. Il faut donc cliquer sur le bouton « ajouter » qui se trouve en dessous de la liste des analytes mémorisés, puis dans la zone de droite choisir l'analyte et les codes.

5.2. Archives

Il s'agit de l'accès à tous les mails que nous vous avons envoyés, classés par type, avec la possibilité de se les renvoyer, et de visualiser les pièces jointes PDF éventuelles. Pour visualiser une archive il suffit de :

- Cliquer sur la zone en haut à gauche qui montre les types d'archives disponibles : Accusés de réception de saisie, résultats d'EEQ, calculs individuels (CIQ externalisé), divers, ou encore toutes les archives sans distinction. Cliquez sur un des types, ce qui provoque l'affichage des archives disponibles de ce type dans la zone du dessous intitulée « archives »
- Dans cette zone d'archives, vous voyez la liste des disponibilités, classée par date : cliquez sur l'archive désirée pour que son détail s'affiche dans la zone de droite

Une fois l'archive voulue affichée, vous pouvez vous la renvoyer par mail en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Par défaut l'envoi se fait sur les adresses mails qui ont été utilisées lors du premier envoi, mais vous pouvez la changer avant de cliquer sur le bouton. Si le mail contenait un fichier PDF, il est également renvoyé. La partie détail contient l'intégralité du texte du mail originel, que vous pouvez éventuellement copier dans le presse papier. Si le mail contenait un fichier PDF, vous pouvez le visualiser en cliquant sur le lien « Voir la pièce jointe »).



















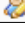
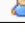
5.3. Gestion des adresses mails

Vous pouvez modifier vous-mêmes 3 paramètres pour votre laboratoire :

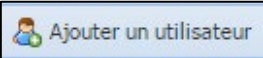


- **Votre adresse email par défaut** (vous pouvez spécifier plusieurs adresses en les séparant par des points virgules, sans espace)
- **Éventuellement des adresses email spécifiques par programme** : par exemple cela peut être utile pour éviter que le responsable des contrôles de biochimie reçoive les résultats d'hémostase (là aussi vous pouvez spécifier plusieurs adresses en les séparant par des points virgules)
- Le type de compte rendus PDF que nous vous envoyons : par défaut nous envoyons les résultats de tous les analytes contrôlés pour une enquête. Dans certains cas cela fait de gros fichiers qui n'intéressent pas forcément tout le monde (par ex : les facteurs de la coagulation). Si vous cochez la case « Ne recevoir que les analytes saisis », le PDF ne comprendra que les analytes pour lesquelles vous avez participé, cependant vous pourrez toujours visualiser l'ensemble des résultats en utilisant la fonction « Résultats globaux », voir paragraphe 3.1.

5.4. Gestion des utilisateurs


Cette fenêtre va vous permettre de gérer vous-mêmes les utilisateurs habilités à faire les saisies d'EEQ. Cela permet d'assurer la traçabilité de la personne ayant saisi les résultats des EEQ. L'identification de cette personne est reportée sur les accusés de saisie que nous vous envoyons.

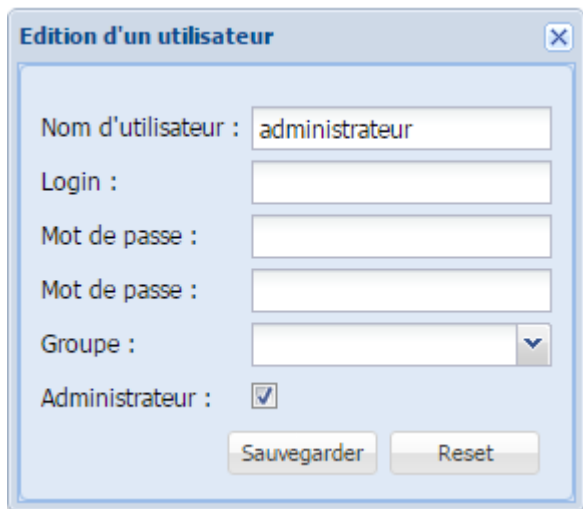
| Gestion des utilisateurs | | | | |
|--------------------------|-------|--------------|----------------|---|
| Ajouter un utilisateur | | | | |
| Nom | Login | Groupe | Administrateur | |
| administrateur | | | ✓ |   |
| user1 | user1 | Habilitation | ✗ |   |
| user2 | user2 | Habilitation | ✗ |   |
| user3 | user3 | Habilitation | ✗ |   |
| user4 | user4 | Habilitation | ✗ |   |
| user5 | user5 | Habilitation | ✗ |   |
| user6 | user6 | Habilitation | ✗ |   |
| user7 | user7 | Habilitation | ✗ |   |
| user8 | user8 | Habilitation | ✗ |   |
| user9 | user9 | Habilitation | ✗ |   |

Vous pouvez :

| Ajouter un utilisateur | Modifier un utilisateur | Supprimer un utilisateur |
|---|---|---|
|  |  |  |

N.B. : seuls les comptes « administrateur » peuvent avoir accès à ces fonctionnalités.

Pour commencer, nous vous conseillons de modifier l'utilisateur par défaut, dénommé Administrateur. Cliquez sur le bouton  pour le modifier. La fenêtre suivante apparaît :

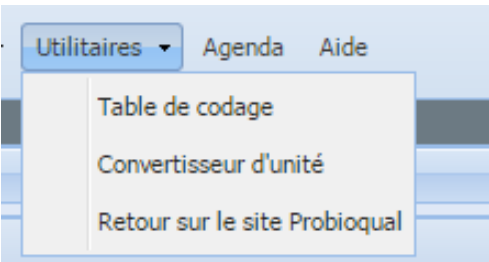


Saisissez votre nom complet à la place de "administrateur"
 Saisissez un login (par exemple vos initiales).
 Ne complétez les cases mot de passe que si vous désirez le changer.
 Sélectionnez le groupe auquel vous appartenez.
 Cliquez sur sauvegarder pour enregistrer les modifications.

En tant qu'administrateur, vous pouvez créer d'autres utilisateurs, avec les droits ou non d'administration (permission de gérer les utilisateurs en cochant la case « administrateur »). Utilisez pour cela le bouton "Ajouter un utilisateur" et complétez les zones.

IMPORTANT : une fois les utilisateurs configurés, il n'est plus possible de se connecter sans le « Login ». Il est donc indispensable d'informer le personnel concerné.

6. MENU « UTILITAIRES »

| | |
|---|---|
|  | <p>Ce menu comporte 3 items :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Table de codage - Convertisseur d'unité - Retour sur le site ProBioQual |
|---|---|

6.1. Table de codage

Vous pouvez chercher dans notre table les codes correspondant à vos techniques, appareils ou codes tri en sélectionnant l'onglet en haut de la fenêtre :



Pour les techniques : vous pouvez affiner la recherche à l'aide des deux menus déroulants de choix de l'analyte et/ou du fournisseur, vous pouvez aussi rechercher sur un nom (ou une partie de nom) de technique, ou encore sur un principe réactionnel. Ces 4 choix de recherche peuvent être mixés. Pour afficher les résultats cliquez sur « Chercher » Une fois la recherche affichée, vous pouvez éventuellement la télécharger : cliquez sur le bouton « Télécharger », puis cliquez avec le bouton droit sur le lien de téléchargement qui s'affiche et choisissez enregistrer sous : le fichier téléchargé est enregistré à l'endroit que vous choisissez, vous pourrez ensuite l'ouvrir avec Excel ou Open Office.

Pour les appareils : vous pouvez chercher sur le fournisseur à l'aide du menu déroulant et ou sur le nom ou une partie du nom de l'appareil

Pour les codes tri : vous avez le choix d'afficher tous les codes tri d'un fournisseur, ou le code tri d'un analyte.

6.2. Convertisseur d'unité

À l'aide du menu déroulant à droite de « choix de la conversion », choisissez l'analyte pour lequel faire une conversion d'unité. Dans la case « valeur à convertir » saisissez le résultat à convertir, puis cliquez sur un des deux boutons « convertir Utrad → USI » pour convertir de g/l en USI, ou l'autre bouton « convertir USI → Utrad » pour convertir de mol en g/L, le résultat s'affiche en dessous.

6.3. Retour sur le site ProBioQual

Permet de retourner facilement sur la page d'accueil du site de ProBioQual. Vous serez alors déconnecté de votre session.

7. MENU « AGENDA »

Cliquez sur Agenda et vous obtiendrez une nouvelle fenêtre (ou un nouvel onglet selon votre navigateur) qui liste les dates limites de saisie des différents EEQ pour lesquels vous êtes inscrit, ainsi que les analytes contrôlés. Attention, il s'agit d'un agenda prévisionnel, susceptible de modifications ou ajouts. Consultez régulièrement votre interface de saisie.

8. MENU « INSCRIPTIONS »

Vous pouvez à cet endroit passer vos commandes par internet et/ou consulter toutes les commandes que vous avez passé auprès de notre association, ceci depuis 1994.

Pour consulter une précédente commande que vous avez passée il vous suffit de cliquer sur la commande que vous souhaitez dans l'encadré en haut à gauche « Commandes validées ». Vous pourrez alors la visualiser dans l'encadré de droite.

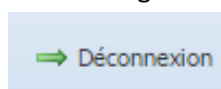
Pour passer une commande par internet il vous suffit de cliquer sur le lien « voir le manuel d'utilisation » et de suivre les indications.

9. MENU « AIDE »

En cliquant sur ce menu une fenêtre s'ouvre avec un lien qui vous permet de visualiser ce document (= le guide d'utilisation du serveur ProBioQual)

10. DÉCONNEXION

En cas d'inactivité de votre part pendant plus de 15 minutes, vous serez automatiquement déconnecté. Pour vous déconnecter manuellement, utilisez le bouton « Log out » qui se trouve en haut et à droite de la fenêtre



11. COMPATIBILITÉ

Notre serveur requiert une version récente du navigateur internet : Internet Explorer 8 ou 9, Firefox 7, 8 ou 9, Chrome dernière version, etc....

L'utilisation d'une version trop ancienne conduira à l'affichage d'une page blanche après identification. Il est de toute façon de votre intérêt d'utiliser la version la plus récente possible de votre navigateur, ceci pour des raisons de sécurité, de rapidité et de meilleur fonctionnement des sites visités.